


Anvisning för provtagning, ifyllnad av förhandsuppgifter och returnering

1

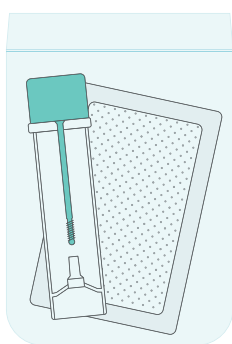

Provtagningspaketet innehåller ett provrör med provtagningssticka, en skyddande returpåse och en fuktabsorberande duk.

OBS! Vätskan i röret innehåller hälsoskadliga ämnen. Vidrör inte provrörets/korkens insida eller vätskan.


2



Ta ett lämpligt rent underlag, till exempel ett kraftigt papper, en dagstidning eller en engångstallrik, och låt avföringen komma på detta.

Ta **inte** avföringen direkt från toalettstolen.

3

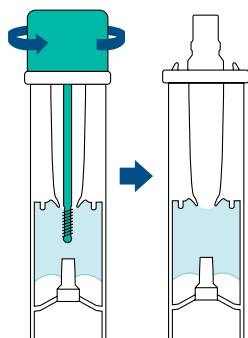


Öppna den **gröna** korken på provröret genom att vrida på den.

Om avföringen är hård kan du fukta den med lite vatten så att du kan stryka provet på provstickan.

Om avföringen är lös kan du torka provstickan med t.ex. toalettpapper innan du sticker in stickan i avföringen.


4

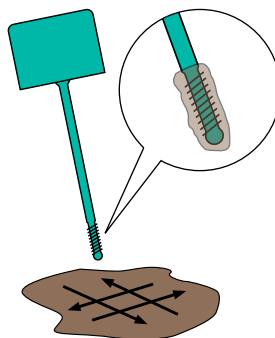

Samla avföring på spetsen av **stickan** genom att **picka 2-3 gånger** med stickan i avföringen.


Provmängden är tillräcklig när spetsen är täckt med avföring.

5

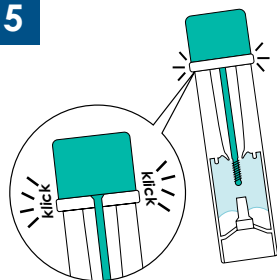


Sätt tillbaka korken med stickan i provröret och **stäng korken** genom att **trycka ordentligt** så att den **knäpps fast**. Öppna inte korken på nytt.

6

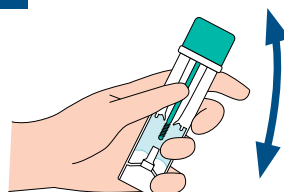

Skaka provröret kraftigt några gånger när du har stängt korken ordentligt.

7

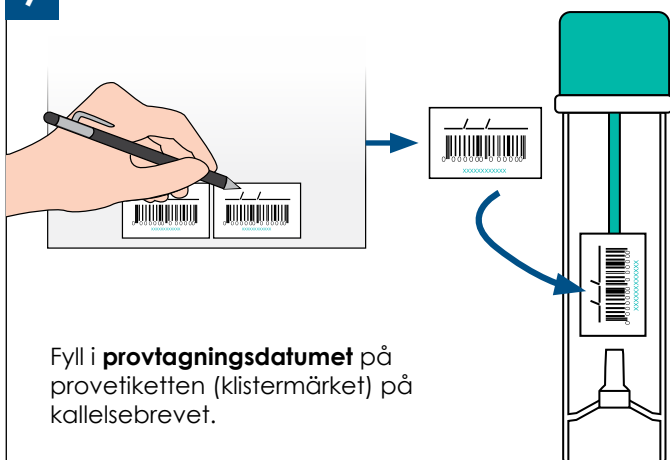

Fyll i **provtagningsdatumet** på provetiketten (klistermärket) på kallelsebrevet.

Lossa den streckodsförsedda provetiketten från papperet. Fäst provetiketten **vertikalt** på provrörets platta sida enligt bilden.

Lägg därefter provröret i returpåsen med absorptionsduk. **Stäng returpåsen ordentligt.**

8




Fyll i **screeningens förhandsuppgifter** på den **elektroniska blanketten**.

www.seula.hus.fi
Användarnamn: nummerserie som börjar med HM på provetiketten.
Lösenord: de första sex siffrorna i din personbeteckning.

Om du inte kan använda den elektroniska blanketten ber vi dig fylla i blanketten för förhandsuppgifter som medföljer kallelsebrevet.

9

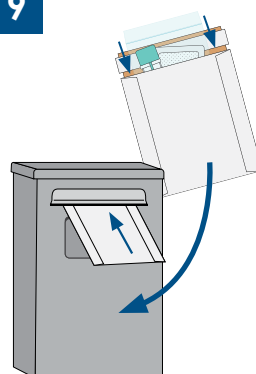

Lägg påsen med provet i **returkuvertet** av kartong som medföljde kallelsen. Om du har fyllt förhandsuppgifterna på pappersblanketten ska du också lägga blanketten i returkuvertet.

Lämna in **kartongkuvertet** **senast nästa vardag** efter provtagningen i **HUS laboratoriets returlåda** eller skicka det per post.

1. Behöver jag förbereda mig inför provtagningen?

- Alla inkallade kan delta i undersökningen, d.v.s. sjukdom eller medicinering förhindrar inte deltagandet.
- Du behöver inte fasta eller pausa din medicinering före provtagningen.
- Du behöver inte äta någon specialkost före provtagningen.
- Du kan ta provet vid vilken tidpunkt som helst på dygnet.

2. Hur förvarar jag provröret innan jag returnerar det?

- Returnera gärna provröret så snart som möjligt efter provtagningen till HUS laboratoriet eller per post. Returkuvertets porto är betalt.
- Förvara provröret i rumstemperatur.

3. Var hittar jag närmaste HUS laboratorium för inlämning av returkuvertet?

- HUS Diagnostikcentrums alla laboratorier finns uppräknade på denna adress: <https://www.hus.fi/sv/sok> -> "Laboratorier".
- För inlämning av prover har HUS laboratoriet en returautomat eller returlåda märkt med "Screening för tarmcancer".
- Du kan också skicka in returkuvertet per post nästa vardag efter provtagningen. Returkuvertets porto är betalt.

4. När behöver jag ett nytt provtagningspaket?

- Om innehållet i provpaketet är bristfälligt eller provröret är defekt på något sätt (t.ex. det finns ingen vätska i provröret) eller om provröret saknas från ditt kallelsepaket.
- Om det inte går att läsa nummerserien som börjar med HM eller streckkoden på kallelsebrevets providentifieringsetikett.

5. Var får jag ett nytt provtagningspaket, om jag behöver ett sådant?

- Om du behöver ett nytt provtagningspaket beställer du det enklast med en blankett på HUS webbplats på adressen www.hus.fi/sv/tarmcancerscreening.

6. Hur och när får jag veta testresultaten?

- Vi informerar dig personligen om testresultaten **med ett brev inom en månad** efter att provet analyserats.
- **Laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon.**

Mer information om provtagning och hjälp vid eventuella problem finns på adressen www.hus.fi/sv/tarmcancerscreening eller hos HUS Diagnostikcentrums kundservice på tel. 09 471 86800 (val 4, screening för tarmcancer).